

Instruções de Uso

Sensores de SpO₂ Reutilizáveis

Modelo: xxxx

Masimo Corporation e Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V

Distribuidor no Brasil:

Medstar Importação e Exportação EIRELI.

Rua Valêncio Soares Rodrigues, 89 Sala 1
Vargem Grande Paulista
CEP: 06730-000 - São Paulo/SP
Tel.: (0XX11) 5092-3700
Fax: (0XX11) 5535-0989

Fabricante Legal

Masimo Corporation

52 Discovery, Irvine, Califórnia, 92618,
Estados Unidos da América

Fabricante Real

Masimo Corporation.

40 and 50 & 60 Parker
Irvine, CA 92618

9600 Jeronimo
Irvine, CA 92618

Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V:

Calzada Del Oro 2001, Parque Industrial
Palaco, Mexicali, B.C, 21600
México

Distribuidor:

Masimo International SARL

Puits-Godet 10
2000 Neuchatel
Suíça

Número de Série: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Registro ANVISA nº: 80047300191

Data de Fabricação: DD/MM/AAAA

Data de Validade: Indeterminado

Responsável Técnico: José Fernando de Menezes – CRF/SP: 26262

Conteúdo:**Sensores de SpO₂ Reutilizáveis, modelo:**

- () 2201 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Adulto Reutilizável DCI-DC3 92 cm
- () 2202 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Adulto Reutilizável DCI-DC12 366 cm
- () 2069 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3 92 cm

- () 2070 – Sensor Rainbow SpO2, SpCO e SpMet Pediátrico Reutilizável DCIP-DC12 366 cm
- () 2053 – Sensor de SpO2 Adulto Reutilizável DCI-DC3 92 cm
- () 2054 – Sensor de SpO2 Adulto Reutilizável DCI-DC12 366 cm
- () 2256 – Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3 92 cm
- () 2257 – Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3 366 cm
- () Sensor de SpO2 Adulto Reutilizável SpO2.COM
- () Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável SpO2.COM
- () 1269 – LNOP DCI, 91 cm,
- () 1276 – LNOP DCIP, 91 cm
- () 1396 – LNOP DCSC, 91 cm
- () 1544 – LNOP YI, 91 cm
- () 1793 – LNOP TF-I, 91 cm
- () 1794 – LNOP TC-I, 91 cm
- () 1863 – LNCS DCI, 91 cm
- () 1864 – LNCS DCIP, 91 cm
- () 1895 – LNCS TC-I, 91 cm
- () 1896 – LNCS TF-I, 91 cm
- () 1969 – LNOP DC-12, 365 cm
- () 2241 – Rainbow DC-3 SC-360, (SpO2, SpMet, SpHb), 91 cm
- () 2242 – Rainbow DC-12 SC-360, (SpO2, SpMet, SpHb) adulto reutilizável, 365cm,
- () 2258 – LNCS YI, 91 cm
- () 2333 – Rainbow DCI, SC-360, ((SpHb, SpO2, e SpMet), 91cm
- () 2334 – Rainbow DCIP SC-360, (SpHb, SpO2, e SpMet) 91cm
- () 2387 – LNOP DC-8, 243 cm
- () 2402 – Rainbow DCP-3 SC-360, (SpO2, SpMet, SpHb), 91cm
- () 2403 – Rainbow DCP-12 SC-360, (SpO2, SpMet, SpHb), 91 cm
- () 2407 – Rainbow® DCI-dc8 (SpO2, SpCO e SpMet), 244 cm
- () 2501 – M-LNCS DCI, 91 cm
- () 2502 – M-LNCS DCIP, 91 cm
- () 2503 – M-LNCS TC-I, 91 cm
- () 2504 – M-LNCS TF-I, 91 cm
- () 2505 – M-LNCS YI, 91 cm
- () 2640 – Rainbow DCIP-dc8, (SpO2, SpCO e SpMet), 244 cm
- () 2643 – Red DBI-dc3, 91 cm
- () 2644 – Red DBI-dc8, 243 cm
- () 2651 – LNOP DBI-dc3, 91 cm
- () 2652 – LNOP DBI-dc8, 243 cm
- () 2653 – LNCS® DBI, 91 cm
- () 2696 – Rainbow DCI, (SpO2, SpCO e SpMet), 91 cm
- () 2697 – Rainbow DCIP, (SpO2, SpCO e SpMet), 91cm
- () 3418 – Rainbow DCI SC-200,
- () 3419 – Rainbow DCIP SC-200,
- () 3420 – Rainbow DCI SC-400,
- () 3421 – Rainbow DCIP SC-400,
- () 9400 – Rainbow 4D DC,
- () 9401 – Rainbow 4D DC,
- () 9402 – Rainbow 4D DC,
- () 2953-OU – Rainbow® 4D DC SC-500, (SpHb, SpO2), 91cm
- () 2954-OU – Rainbow® 4D DC SC-10000, (SpHb, SpO2), 91 cm
- () 2192 – LNCS Multisite-L, 91 cm
- () 2506 – M-LNCS Multisite-L., 91 cm
- () 2191 – LNOP Multisite-L, 91 cm
- () LNCS DCiv
- () LNCS DCIPv
- () M-LNCS DCiv
- () M-LNCS DCIPv

Acessórios

INDICAÇÕES

Os sensores reutilizáveis de SpO₂ Adulto, Pediátrico são indicados para uso individual em pacientes, para a monitorização contínua não-invasiva da saturação funcional do oxigênio da hemoglobina arterial (SpO₂) e da taxa de pulsação (medida por um sensor SpO₂) para utilização em pacientes adultos, pediátricos, bebês e recém-nascidos, tanto em condições de movimento como em condições estacionárias, e em pacientes que estejam bem ou mal irrigados em hospitais, instalações de tipo hospitalar, ambientes móveis e em casa.

Os sensores foram validados para o Oxímetro de Pulso Masimo SET® Radical e o Oxímetro de Pulso Nellcor N-200. A exatidão da saturação dos sensores para recém-nascidos e bebês prematuros foi validada em voluntários adultos, tendo sido adicionado 1% de forma a ter em conta as propriedades da hemoglobina fetal.

O local do sensor deve ser inspecionado, pelo menos, a cada oito (8) horas; se a condição circulatória ou a integridade da pele estiver comprometida, o sensor deve ser aplicado num local diferente.

CONTRAINDICAÇÕES

Os sensores são contraindicados em pacientes que exibam reações alérgicas a produtos de espuma de borracha e/ou a fita adesiva.

Sensores LNCS DCIv, LNCS DCIPv, M-LNCS DCIv e M-LNCS DCIPv

INDICAÇÕES

Os sensores reutilizáveis LNCS® DCI®v, DCI-Pv, M-LNCS DCI v e DCI-Pv são indicados para a monitorização “pontual” ou contínua não invasiva da saturação funcional do oxigênio da hemoglobina arterial (SpO₂) e da frequência de pulsação (medida por um sensor SpO₂) para utilização em pacientes adultos e pediátricos, tanto em condições de movimento como em condições estacionárias, e em pacientes que estejam bem ou mal irrigados em hospitais, instalações de tipo hospitalar, ambientes móveis em casa.

	DCIv	DCI-Pv
	> 30 kg	10 - 50 kg
Local de aplicação	Dedo da Mão ou do Pé	Dedo da Mão Pé ou do Polegar
Exactidão da saturação, sem movimento	± 2%	± 2%
Exactidão da saturação, com movimento	± 3%	± 3%
Exactidão da frequência do pulso, sem movimento	± 3 ppm	± 3 ppm
Exactidão da frequência do pulso, com movimento	± 5 ppm	± 5 ppm
Exactidão em situações de baixa perfusão	SpO ₂ ± 2%	SpO ₂ ± 2%
	Pulso ± 3 bpm	Pulso ± 3 bpm

O LNCS DCIv, o DCI-Pv, o M-LNCS DCI v e o DCI-Pv destinam-se à utilização com aparelhos com oximetria Masimo SET® ou licenciados para a utilização de sensores

Anexo III.B

LNCS e M-LNCS. Consulte os fabricantes de cada um dos instrumentos para saber qual a compatibilidade de um determinado instrumento com os modelos de sensores. Os fabricantes do instrumento têm a responsabilidade de determinar se os instrumentos são compatíveis com cada um dos modelos de sensores. Os sensores LNCS DCIv e DCI-Pv foi validada no oximetria de tecnologia Masimo SET.

CONTRAINDICAÇÕES

A utilização dos sensores LNCS DCIv e M-LNCS DCIv são contraindicados em doentes com ativos ou durante períodos de tempo prolongados. Não foi concebido para monitorização de longa duração. Tem de ser removido e reposicionado num local de monitorização diferente, pelo menos a cada quatro (4) horas. Se for necessária uma monitorização prolongada, é recomendada a utilização de sensores adesivos LNCS Amtx ou Pmtx.

LIMPEZA

1. Retire o sensor do doente e separe-o do cabo do doente.
2. Limpe o sensor com uma compressa com álcool isopropílico a 70%.
3. Antes de colocar o sensor num doente, deixe-o secar totalmente. Se for necessária uma desinfecção ligeira:
 1. Utilize uma solução de lixívia e água numa diluição de 1:10.
 2. Impregne um pano ou uma compressa de gaze com a solução de limpeza e limpe todas as superfícies do sensor e do cabo.
 3. Impregne outro pano ou compressa com água destilada ou estéril e limpe todas as superfícies do sensor e do cabo.
 4. Seque o sensor e o cabo com um pano limpo ou uma compressa de gaze seca.

CUIDADO:

- Não utilize lixívia não diluída (hipoclorito de sódio a 5%-5,25%) ou qualquer outra solução de limpeza para além das recomendadas neste documento, uma vez que poderão danificar o sensor de forma permanente.
- Nunca mergulhe o sensor ou o conector em nenhuma solução líquida.
- Não esterilize por irradiação, vapor, autoclave ou por óxido de etileno.

INSTRUÇÕES

A) Seleção do local

• Sensores pediátricos

- 10-50 kg O local preferido é o dedo médio ou anelar da mão não dominante.

• Sensores adultos

- > 30 kg O local preferido é o dedo médio ou anelar da mão não dominante.
 - Escolha sempre um local com boa perfusão e com área suficiente para cobrir totalmente a janela de deteção do sensor.
 - Antes da colocação do sensor, o local não deverá conter detritos e deverá estar seco.

B) Ligação do sensor ao doente

1. Abra a bolsa e retire o sensor. Retire a proteção do adesivo do sensor.

PACIENTES PEDIÁTRICOS (10-50 kg) e ADULTOS (> 30 kg)

2. Oriente o cabo do sensor de modo que o detector possa ser colocado primeiro. Coloque a ponta do dedo na linha pontilhada, com a parte carnuda do dedo cobrindo a janela do detector. A cobertura completa da janela de detecção é necessária para a garantia de precisão dos dados.
3. Em uma aplicação apropriada, o emissor e o detector devem estar alinhados verticalmente.
4. Verifique se o posicionamento está correto, reposicionando se necessário.

C) Desconexão do sensor do cabo do paciente

1. Levante a tampa protetora para aceder ao conector do sensor.
2. Puxe com cuidado o conector do sensor, para removê-lo do cabo do doente.

ADVERTÊNCIAS

- O local deve ser inspecionado pelo menos de 8 em 8 horas para garantir uma adesão correta, a circulação, a integridade da pele e o alinhamento óptico adequado.
- A circulação distal relativamente ao local do sensor deve ser verificada regularmente.
- Devem ser tomadas precauções com os pacientes mal irrigados; pode ocorrer erosão da pele e/ou necrose de pressão.
- Em situações de baixa perfusão, é necessário avaliar frequentemente o local do sensor relativamente à existência de sinais de isquemia dos tecidos, o que poderá conduzir a necrose por pressão.
- Em situações de perfusão extremamente baixa no local monitorizado, as leituras poderão apresentar valores inferiores à saturação de oxigênio arterial central.
- A aplicação de sensores demasiado apertados poderá causar leituras erroneamente baixas.
- Seja prudente ao aplicar um sensor numa área com integridade da pele comprometida: Aplicar fita ou exercer pressão nesse local pode reduzir ainda mais a circulação.
- Se o sensor estiver enrolado com demasiada pressão ou for utilizada fita suplementar, pode ocorrer uma congestão venosa ou pulsações, causando leituras erradas.
- Os sensores incorretamente aplicados ou os sensores que se tenham deslocado parcialmente do local poderão originar leituras acima ou abaixo da saturação de oxigênio arterial real.
- Não utilize fita adesiva para fixar o sensor ao local; isto poderá restringir o fluxo sanguíneo e originar leituras inexatas. A utilização de fita adicional poderá provocar lesões na pele ou danificar o sensor.
- O sensor não deverá apresentar defeitos visíveis. Nunca utilize um sensor danificado ou com os circuitos elétricos expostos.
- Não tente reprocessar, recondicionar ou reciclar os sensores ou os cabos de paciente Masimo, já que esses processos podem danificar os componentes elétricos, com risco potencial de ferimentos ao paciente.
- Para evitar danos, não molhe nem mergulhe o sensor em qualquer solução líquida.
- Oriente o cabo do sensor e o cabo do doente com cuidado para reduzir a possibilidade de enredamento ou estrangulamento do doente.
- Os corantes intravasculares ou aplicados externamente (tais como verniz de unhas) podem originar medições inexatas da SpO₂.

Anexo III.B

- Os níveis elevados de carboxihemoglobina (COHb) podem conduzir a medições inexatas da SpO₂.
- Os níveis elevados de metahemoglobina (MetHb) originam medições inexatas da SpO₂.
- A aplicação inadequada dos sensores pode originar medições incorretas.
- Não utilizar o sensor durante exames de ressonância magnética.
- Se utilizar a oximetria de pulso durante a irradiação corporal total, mantenha o sensor fora do campo de irradiação. Se o sensor estiver exposto à irradiação, a leitura pode ser imprecisa ou a unidade pode ler zero durante a duração do período de irradiação ativa.
- Evite a colocação do sensor numa extremidade que tenha um cateter arterial ou uma braçadeira de pressão arterial.
- As pulsações provenientes de um suporte com balão intra-aórtico podem ser aditivas em relação à frequência do pulso no visor da frequência do pulso do oxímetro. Verifique a frequência do pulso do doente em relação à frequência cardíaca do ECG.
- A congestão venosa poderá originar uma leitura por defeito da saturação de oxigênio arterial real. Assim, deverá garantir a existência de um efluxo venoso adequado a partir do local monitorizado. O sensor não deve ser colocado abaixo do nível do coração (por exemplo, sensor na mão do doente acamado com o braço pendente).
- As pulsações venosas podem causar leituras erroneamente baixas (por exemplo, regurgitação da válvula tricúspide).
- Não modifique nem altere o sensor de forma alguma. As alterações ou modificações podem afetar o desempenho e/ou a exatidão.
- As concentrações elevadas de oxigênio podem predispor à ocorrência de retinopias em bebês prematuros. Assim, o limite superior de alarme para a saturação de oxigênio deve ser cuidadosamente selecionado, de acordo com padrões clínicos aceites.

ESPECIFICAÇÕES

Em situações de ausência de movimentação, a exatidão dos sensores para um intervalo de valores de 70% a 100% de SpO₂ $\pm$ 2 dígitos ($\pm$ 1 desvio padrão) para adultos/doentes pediátricos e de $\pm$ 3 dígitos ($\pm$ 1 desvio padrão) para recém-nascidos, quando utilizados com os monitores de oximetria de pulso Masimo SET ou com módulos de oximetria de pulso Masimo SET licenciados, que utilizem cabos de doente da série LNC. A exatidão da frequência do pulso entre 25 e 240 PPM é de $\pm$ 3 PPM ($\pm$ 1 desvio padrão). Os sensores foram validados no Oxímetro de pulso Masimo SET Radical.

Quando utilizado com oxímetros de pulso compatíveis com Nellcor e Nellcor em condições estacionárias, a precisão dos sensores é de $\pm$ 2 dígitos ($\pm$ 1 desvio padrão), para adultos/crianças/bebês e $\pm$ 3 dígitos ($\pm$ 1 desvio padrão) para recém-nascidos. de 70-100% SpO₂ A exatidão da frequência de pulso de 25 a 240 bpm é de $\pm$ 3 bpm (desvio padrão). Os sensores foram validados para o oxímetro de pulso Nellcor N-200.

COMPATIBILIDADE DO INSTRUMENTO

Este sensor destina-se somente à utilização com aparelhos de oximetria Masimo SET ou monitores de oximetria de pulso licenciados para a utilização de sensores de SpO₂ e também para oxímetros de pulso compatíveis com Nellcor. Cada sensor foi concebido para funcionar corretamente apenas com os sistemas de oximetria de pulso do fabricante do instrumento original. A utilização deste sensor com outros instrumentos poderá resultar na sua inoperância ou num desempenho incorreto.

GARANTIA

A Masimo garante apenas ao comprador inicial que todos os produtos fabricados, desde que utilizados de acordo com as instruções fornecidas com os produtos pela Masimo, não apresentam defeitos de material e de fabrico durante um período de seis (6) meses. Os produtos de utilização única estão garantidos apenas relativamente à utilização num único doente. A GARANTIA PRECEDENTE É A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA QUE PODE SER APLICADA AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA MASIMO AO COMPRADOR. A MASIMO RENUNCIA EXPRESSAMENTE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS ORAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A ÚNICA OBRIGAÇÃO DA MASIMO É O RECURSO EXCLUSIVO DO COMPRADOR RELATIVAMENTE À QUEBRA DE QUALQUER GARANTIA SERÁ, POR OPÇÃO DA MASIMO, A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Esta garantia não abrange qualquer produto que tenha sido utilizado em desrespeito pelas instruções de funcionamento fornecidas com o mesmo, ou que tenha sido sujeito a utilização incorreta, negligência, acidente ou danos criados externamente. Esta garantia não se aplica a sensores ou a cabos reprocessados, recondicionados ou reciclados. A MASIMO NUNCA SERÁ RESPONSÁVEL JUNTO AO COMPRADOR OU A QUALQUER OUTRA PESSOA POR DANOS INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A PERDA DE LUCRO), MESMO QUANDO INFORMADA DESSA POSSIBILIDADE. A COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA MASIMO RELATIVA A PRODUTOS VENDIDOS AO COMPRADOR (SEGUNDO CONTRATO, GARANTIA, POR RESPONSABILIDADE CIVIL OU OUTRO VÍNCULO) NUNCA EXCEDERÁ A QUANTIA PAGA PELO COMPRADOR PELO CONJUNTO DO(S) PRODUTO(S) ENVOLVIDO NO VÍNCULO. EM HIPÓTESE ALGUMA A MASIMO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER DANO EM PRODUTOS REPROCESSADOS, RECONDicionados OU RECICLADOS. AS LIMITAÇÕES NESTA SEÇÃO NÃO IRÃO EXCLUIR QUALQUER RESPONSABILIDADE A QUAL, SEGUNDO A LEI DE RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS ADEQUADA, NÃO POSSA SER LEGALMENTE EXCLUÍDA POR CONTRATO.

SEM LICENÇA IMPLÍCITA

A COMPRA OU POSSE DESTE SENSOR NÃO CONFERE QUALQUER LICENÇA EXPRESSA OU IMPLÍCITA PARA UTILIZAÇÃO DO SENSOR COM QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO NÃO AUTORIZADO EM SEPARADO PARA UTILIZAÇÃO COM OS SENSORES LNCS.

CUIDADO: A LEGISLAÇÃO FEDERAL (E.U.A.) RESTRINGE A VENDA DESTE DISPOSITIVO A MÉDICOS OU MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Os seguintes símbolos podem aparecer no produto ou no rótulo do produto:

SÍMBOLOS	
	Não reutilizar
	Não-estéril
Non-sterile	Não-estéril
	Sem látex
Latex free	Sem látex
>	Superior a
<	Inferior a
	Representante autorizado EUE
	Marca de Conformidade com a Directiva Europeia sobre Dispositivos Médicos 93/42/EEC
	Cuidado, Consultar os documentos anexos
	Peso corporal
	Peso corporal
R _x Only	A lei federal limita a venda deste dispositivo aos médicos ou através de receita médica (apenas para os EUA).
	Código do lote
REF	Número do catálogo (número do modelo)

INFORMAÇÕES GRÁFICAS



2201 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Adulto Reutilizável DCI-DC3

2202 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Adulto Reutilizável DCI-DC12



2069 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3

2070 – Sensor Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet Pediátrico Reutilizável DCIP-DC12



2053 – Sensor de SpO₂ Adulto Reutilizável DCI-DC3

2054 – Sensor de SpO₂ Adulto Reutilizável DCI-DC12



2256 – Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3
2257 – Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável DCIP-DC3



[Order Now](#)

Sensor de SpO2 Adulto Reutilizável SpO2.COM



[Order Now](#)

Sensor de SpO2 Pediátrico Reutilizável SpO2.COM

DECLARAÇÃO

As partes, peças e acessórios descritos a seguir são comercializados somente com o equipamento Oxímetro de Pulso Rad 8, devendo apenas serem utilizados para o fim a que se destinam.

Tabela de inclusão de novos sensores de SpO2 Reutilizáveis:

Número	Descrição	Figura ilustrativa dos produtos/acessórios
1269	LNOP DCI - 91 cm	 A white cable with a multi-pin connector at one end and a white, finger-like probe at the other. The probe has a red circular logo with a white 'S' on it.
1276	LNOP DCIP - 91 cm	 A white cable with a multi-pin connector at one end and a white, finger-like probe at the other. The probe has a red circular logo with a white 'S' and some text on it.
1396	LNOP DCSC - 91 cm	 A white cable with a multi-pin connector at one end and a white, finger-like probe at the other. The probe has a red circular logo with a white 'S' on it.

1544	LNOP YI - 91 cm	
1793	LNOP TF-I - 91 cm	
1794	LNOP TC-I - 91 cm	
1863	LNCS DCI - 91 cm	
1864	LNCS DCIP - 91 cm	

1895	LNCS TC-I - 91 cm	
1896	LNCS TF-I - 91 cm	
1969	LNOP DC-12 - 365 cm	
2241	Rainbow DC-3 SC-360 - (SpO2, SpMet, SpHb), 91 cm	
2242	Rainbow DC-12 SC-360 - (SpO2, SpMet, SpHb) 365cm	

2258	LNCS YI - 91 cm	
2333	Rainbow DCI, SC-360 - (SpHb, SpO2, e SpMet), 91cm	
2334	Rainbow DCIP SC-360 (SpHb, SpO2, e SpMet) 91cm	
2387	LNOP DC-8 - 243 cm	

2402	Rainbow DCP-3 SC-360 - (SpO2, SpMet, SpHb), 91cm	
2403	Rainbow DCP-12 SC-360 - (SpO2, SpMet, SpHb), 91 cm	
2407	Rainbow® DCI-dc8 - (SpO2, SpCO e SpMet), 244 cm	
2501	M-LNCS DCI - 91 cm	

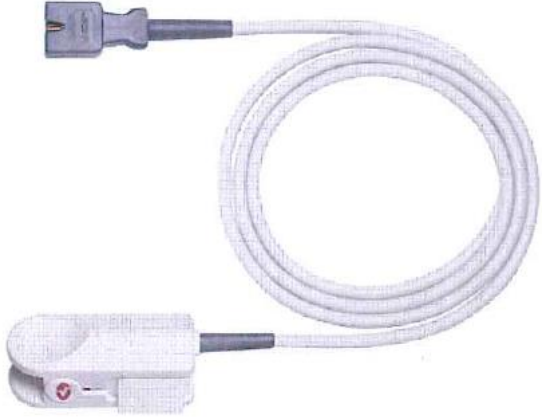
2502	M-LNCS DCIP - 91 cm	
2503	M-LNCS TC-I - 91 cm	
2504	M-LNCS TF-I - 91 cm	
2505	M-LNCS YI - 91 cm	
2640	Rainbow DCIP-dc8 - (SpO2, SpCO e SpMet), 244 cm	

2643	Red DBI-dc3 - 91 cm	
2644	Red DBI-dc8 - 243 cm	
2651	LNOP DBI-dc3 - 91 cm	
2652	LNOP DBI-dc8 - 243 cm	

2653	LNCS® DBI - 91 cm	
2357	Light Shield for Reusable Sensors -	
2696	Rainbow DCI - (SpO2, SpCO e SpMet), 91 cm	
2697	Rainbow DCIP - (SpO2, SpCO e SpMet), 91cm	

3418	Rainbow DCI SC-200	
3419	Rainbow DCIP SC-200	
3420	Rainbow DCI SC-400	
3421	Rainbow DCIP SC-400	

9400	Rainbow 4D DC, Sensor Small -	
9401	Rainbow 4D DC, Sensor Medium	
9402	Rainbow 4D DC, Sensor Large	
2953-OU	Rainbow® 4D DC SC-500, (SpHb, SpO2), 91cm	

2954-OU	Rainbow® 4D DC SC-1000, (SpHb, SpO2), 91 cm	
2192	LNCS Multi-site-L, 91 cm	Figura não disponível
2506	M-LNCS Mult-isite-L., 91 cm	Figura não disponível
2191	LNOP Multisite-L, 91 cm	Figura não disponível
	LNCS DCIv	
	LNCS DCIPv	

	M-LNCS DCIv	 A white medical cable with a coiled section. One end has a large, white, rectangular connector with a black latch. The other end has a smaller, white, rectangular connector with a red circular indicator and a black latch.
	M-LNCS DCIPv	 A white medical cable with a coiled section. One end has a large, white, rectangular connector with a black latch. The other end has a smaller, white, rectangular connector with a red circular indicator, four colored ports (blue, green, yellow, red), and a black latch.

Declaramos verdadeiras as informações apresentadas neste Modelo de Instruções de Uso.

José Fernando de Menezes
CRF/SP: 26262
Responsável Técnico

Roberto Carlos Latini
Responsável legal